

**seca 210**

**seca**  
Precision for health

## Vivissime congratulazioni

Con il materassino graduato seca 210 avete acquistato uno strumento preciso e contemporaneamente robusto per misurare la statura di lattanti.

Il materassino graduato seca 210 è concepito per l'impiego negli ambulatori pediatrici, negli ospedali per bambini oppure per le visite a domicilio di levatrici e pediatri.

Il materassino graduato si può arrotolare ed, in conseguenza, richiede solo poco spazio. Inoltre, sull'arresto per la testa nel materassino graduato si trovano dei fori, che servono per appendere il materassino graduato ad una parete.

## Sicurezza

Prima di utilizzare il nuovo materassino graduato, prendetevi per favore un po' di tempo, per leggere le seguenti avvertenze riguardanti la sicurezza.

Attenetevi alle indicazioni nelle istruzioni per l'uso.

- Non lasciate mai il lattante sdraiato sul materassino graduato senza sorveglianza.
- Eseguite le misure della statura solo su supporti, dai quali il lattante non può cadere.
- Abbiate cura di pulire e disinfettare regolarmente il materassino graduato, per evitare la trasmissione di malattie contagiose.
- Per una misurazione esatta della statura occorre idealmente una seconda persona.


## Uso

### Procedimento di misura

1. Mettete il lattante sdraiato sul materassino graduato. La testa del lattante deve essere accostata all'arresto per la testa (1) del materassino graduato.
2. Con la mano destra, fate scorrere l'arresto per i piedi (2) nella direzione dei piedi del lattante. La mano sinistra tiene fermo il lattante.

3. Raddrizzare le gambe, premendo leggermente con la mano sinistra le ginocchia del lattante verso il piano del materassino graduato, facendo attenzione.
4. Con la mano destra accostare l'arresto per i piedi (2) alle piante dei piedi del bambino ad angolo retto.
5. Lettura della statura sulla marcatura sul fondo del materassino graduato (3).

Se ci si attiene al modo di procedere descritto in precedenza, si raggiunge una precisione superiore a +/- 5 mm.

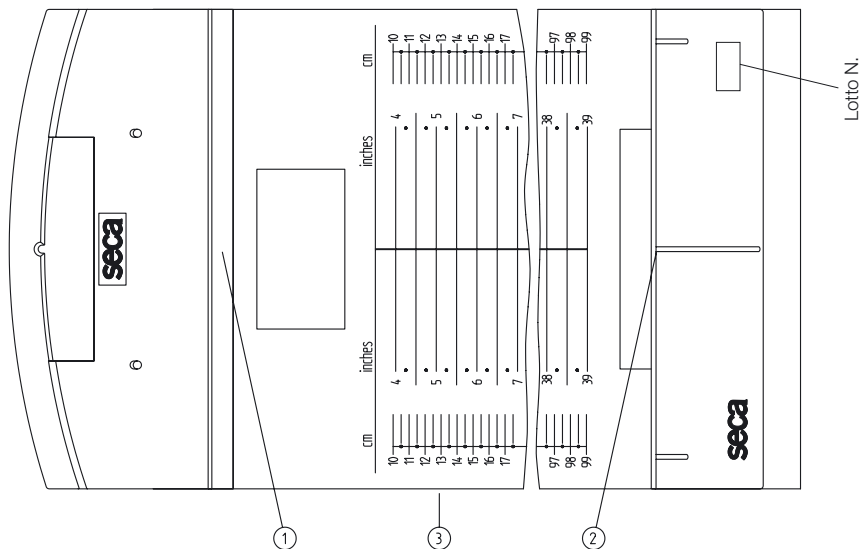

## Pulizia

Pulite il materassino graduato a seconda delle necessità con un detersivo per usi domestici oppure con disinfettanti normalmente in commercio. Rispettate le avvertenze del fabbricante.

## Specifiche tecniche

Campo di misura:	100 - 990 mm / 4 - 39 pollici
Divisione:	5 mm / 1/4 pollice
Precisione:	superiore a $\pm 5$ mm
Dimensioni (LxAxP):	300 mm x 140 mm x 1340 mm
Peso proprio:	circa 500 g
Campo di temperatura:	+ 10°C fino a + 40 °C
Prodotto medicale conforme alla direttiva 93/42/CEE:	classe I con funzione di misura

## Smaltimento

Se non si potesse più utilizzare il materassino graduato, l'ente competente per la rimozione dei rifiuti vi darà volentieri delle informazioni sulle misure necessarie per lo smaltimento conforme alle regole della tecnica.

## Garanzia

Per difetti che si possono ricondurre ad errori di materiale o di fabbricazione vale un termine di garanzia di due anni a partire dalla consegna. Tutte le parti mobili come, ad esempio, batterie, cavi, alimentatori, accumulatori, ecc, ne sono escluse. Difetti che sono coperti dalla garanzia, verranno eliminati gratuitamente per il cliente contro presentazione della ricevuta d'acquisto. Non è possibile prendere in considerazione altre pretese. I costi del trasporto di andata e di ritorno sono a carico del cliente, se l'apparecchio si trova in un luogo diverso dal domicilio del cliente. Nel caso di danni dovuti al trasporto i diritti di garanzia si possono far valere solo se per il trasporto si è utilizzato l'imballaggio originale completo e la merce vi è stata fissata in modo conforme allo stato dell'imballaggio originale. Conservate quindi le parti dell'imballaggio.

Non vi è nessuna garanzia, se l'apparecchio è stato aperto da persone, che non sono state esplicitamente autorizzate a ciò dalla seca.

Preghiamo i clienti all'estero di rivolgersi nei casi previsti dalla garanzia direttamente al venditore del rispettivo Paese.

## Dichiarazione di conformità

Strumento per la misura della statura

Modello seca 210

Lotto N.: vedere materassino graduato

Il materassino graduato soddisfa i requisiti vigenti della direttiva 93/42/CEE su prodotti medicali.

seca gmbh & co. kg.

  
Sönke Vogel

– Geschäftsführer Finanzen & Technik –

Hamburg

: [www.seca.com](http://www.seca.com)

## **seca** deutschland

Medical Scales and Measuring Systems

seca gmbh & co. kg.

Hammer Steindamm 9-25

22089 Hamburg • Germany

Phone • +49 (0)40 20 00 00 0

Fax • +49 (0)40 20 00 00 50

E-mail • [info@seca.com](mailto:info@seca.com)

All contact data under [www.seca.com](http://www.seca.com)

17-10-02-222 h/08 L

**seca**  
group

**seca** deutschland

**seca** france

**seca** united kingdom

**seca** north america

**seca** schweiz

**seca** zhong guo

**seca** nihon

**seca** mexico

**seca** austria