


GONIOMETRO DA 7" ROBINSON 180°

Manuale d'uso

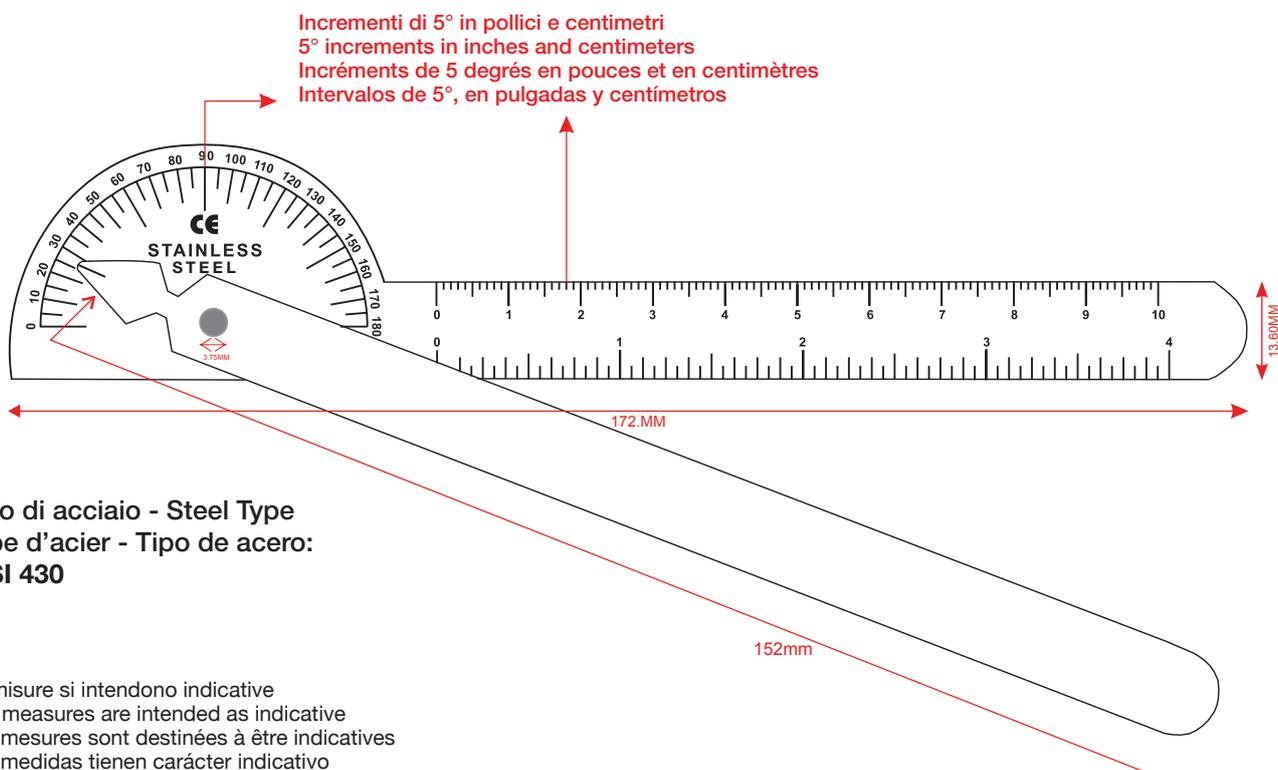

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

REF 24902

CE



ISTRUZIONI PER L'USO

Con il goniometro, è possibile misurare il campo di movimento delle articolazioni delle dita (metacarpofalangee e interfalangee) e di altre piccole articolazioni, tra cui le dita dei piedi. Il goniometro misura il campo di movimento (ROM) di varie articolazioni.

La testa da 180° è marcata con incrementi di 5° Scala lineare sulle misure del braccio in pollici e centimetri. La tensione tra le braccia è controllata dalla manopola del pollice.

INDICAZIONE PER L'USO E PRECAUZIONI

I dispositivi sono destinati all'uso professionale da parte di operatori qualificati con le necessarie competenze. L'uso del prodotto comporta il contatto diretto con la cute del paziente; utilizzare sempre guanti protettivi, non usare su cute lesa, maneggiare con cura al fine di evitare abrasioni accidentali.

Pulire e sterilizzare prima di ogni utilizzo; utilizzare soluzione disinfettante non aggressiva a ph neutro (PH7), non utilizzare soluzioni contenenti ioni di cloruro o ad alto contenuto di alcol.

Prodotto destinato a fornire misurazioni indicative di facile lettura. Dispositivo Medico di classe I.
