


05002 TORSIOMETRO

È un pratico strumento per l'indagine della rotazione del tronco in ortostatismo.

La valutazione di un soggetto con sospetta scoliosi viene effettuata in posizione di attenti. La base dello strumento viene accostata al sacro; viene in tal modo definito un piano zero di riferimento, rispetto al quale verrà letto l'allineamento del tronco sul piano trasverso al livello desiderato. Quando l'elemento mobile viene a sua volta accostato al dorso slitterà nel suo alloggiamento di un numero di gradi corrispondente alla rotazione del tronco. Un indice sull'alloggiamento segnala i gradi di rotazione.

La totale assenza di invasività e la praticità d'uso rendono il torsiometro uno strumento ideale per l'utilizzo nell'ambulatorio specialistico (fisiatrico, ortopedico) e nella palestra di fisioterapia e di analisi del movimento.

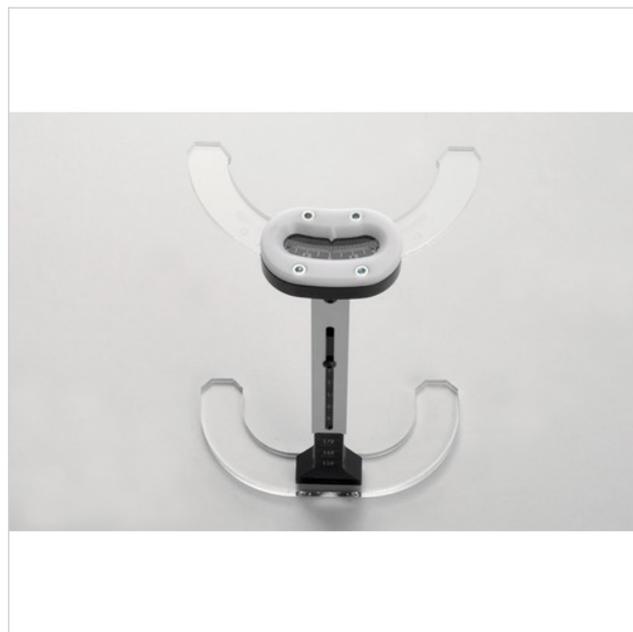

05002 - TORSIOMETRO

Altre immagini dell'articolo

